



Kit antidecubito materasso in Nylon+PVC h582_243

Sistema antidecubito con materasso Nylon+PVC e compressore con allarmi e Static. Dimensioni materasso: L 200 x L 86 x P 21 cm.

Il **kit antidecubito materasso in Nylon+PVC H582_243** è un sistema completo **materasso + compressore** indicato per la **prevenzione delle piaghe da decubito fino al IV stadio**, ideale per utilizzo professionale in **ospedale, RSA e assistenza domiciliare**. La gestione della pressione è progettata per ridurre i punti di carico e supportare il paziente nelle lunghe permanenze a letto, con una struttura a elementi pensata per comfort e sicurezza.

La parte superiore del materasso integra **4 elementi statici** con funzione **cuscinino per la testa**, mentre la restante superficie è organizzata in **2 sezioni** a funzionamento **alternato a 2 vie**. L'**altezza degli elementi** consente di utilizzare il sistema **senza materasso aggiuntivo**, semplificando l'allestimento del letto. Gli elementi sono realizzati con tecnica **CELL-ON-CELL**, che divide la sezione in due moduli: quello **inferiore rimane costantemente gonfio** per ridurre l'effetto **BOTTOM-OUT (sprofondamento)** e garantire **sicurezza anche in caso di mancanza di corrente**.

Il kit è completo di **coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, impermeabile e traspirante**, verificata secondo le **norme europee di reazione al fuoco**, con **zip su tutti e quattro i lati** per una rimozione e pulizia più rapide. Il fissaggio al letto avviene tramite **cinghie in dotazione** e sono presenti **occhielli passacavo** per una gestione ordinata dell'impianto. La **funzione STATIC** consente di bloccare l'alternanza e utilizzare il sistema come un normale materasso. La connessione tra materasso e compressore avviene tramite **connettori veloci con chiusura**, utili anche in caso di **trasporto del paziente**. Il compressore, infine, offre **regolazione manuale della pressione**, **allarme visivo e sonoro** per bassa pressione e **filtro aria intercambiabile**, con rumorosità contenuta per un miglior comfort in reparto.

Scegli un sistema avanzato per la prevenzione fino al IV stadio con tecnologia anti-sprofondamento. Acquista ora **kit antidecubito materasso in Nylon+PVC H582_243** o richiedi un preventivo per forniture in quantità (reparti, RSA, capitolati).

Caratteristiche tecniche:

- **Indicazione:** prevenzione piaghe da decubito fino al IV stadio
- **Sistema:** materasso + compressore
- **Materasso:** in PVC, materiale Nylon+PVC
- **Struttura elementi:** primi 4 elementi statici (cuscinino testa) + restante parte in 2 sezioni a funzionamento alternato 2 vie
- **Altezza elementi:** consente uso senza materasso aggiuntivo
- **Tecnologia elementi:** CELL-ON-CELL (modulo inferiore sempre gonfio per ridurre effetto BOTTOM-OUT e garantire sicurezza in assenza di corrente)
- **Coperta:** imbottita Nylon/PU biocompatibile, impermeabile, traspirante
- **Reazione al fuoco:** verificata secondo norme europee
- **Zip coperta:** su tutti e quattro i lati
- **Fissaggio al letto:** cinghie in dotazione
- **Gestione cavi:** occhielli passacavo
- **Funzione STATIC:** blocca alternanza e rende il sistema un normale materasso
- **Connessione materasso/compressore:** connettori veloci con chiusura (utilizzabili in caso di trasporto del paziente)
- **Valvola CPR:** tempo deflazione circa 15 sec
- **Compressore – Dimensioni:** L 300 x P 135 x H 110 mm
- **Compressore – Alimentazione:** 220V / 50 Hz
- **Compressore – Pressione erogata:** 55–120 mmHg
- **Compressore – Cavo alimentazione:** 5 m

- **Compressore – Uscita d’aria:** 7.5/8.5 LPM
- **Compressore – Tempo ciclo:** 12 min
- **Compressore – Fusibile:** T1A 250V
- **Compressore – Rumorosità:** 30–35 dB
- **Compressore – Regolazione pressione:** manuale
- **Compressore – Allarme bassa pressione:** visivo e sonoro
- **Compressore – Filtro aria:** intercambiabile
- **Materasso – Dimensioni in funzione:** L 200 x L 86 x P 21 cm
- **Materasso – Altezza elemento gonfio:** 20,3 cm
- **Materasso – Numero elementi:** 20 (di cui 8 microforati)
- **Materasso – Portata:** 200 kg

Benefici per l'utente:

- **Prevenzione:** avanzata fino al IV stadio con pressione alternata a 2 vie.
- **Maggiore:** sicurezza anti-sprofondamento grazie a tecnologia CELL-ON-CELL (riduzione BOTTOM-OUT) e supporto in assenza di corrente.
- **Utilizzo:** pratico senza materasso aggiuntivo grazie all'altezza degli elementi.
- **Gestione:** clinica e igiene semplificate con coperta impermeabile/traspirante e zip su 4 lati.
- **Continuità:** e sicurezza operative con allarmi bassa pressione, valvola CPR e connettori veloci per trasporto.

FAQ:

1. **Per quale livello di prevenzione è indicato H582_243?**
È indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al IV stadio.
2. **Come è organizzato il materasso a livello di elementi e funzionamento?**
Ha 4 elementi statici per la testa e il resto in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie.
3. **Che cos'è la tecnologia CELL-ON-CELL e a cosa serve?**
Divide l'elemento in due moduli: quello inferiore resta gonfio, riducendo il BOTTOM-OUT e garantendo sicurezza in caso di mancanza di corrente.
4. **A cosa serve la funzione STATIC?**
La funzione STATIC blocca l'alternanza e rende il sistema utilizzabile come un normale materasso.
5. **Come si gestiscono pulizia e installazione?**
Coperta in Nylon/PU con zip su 4 lati, fissaggio con cinghie e presenza di occhielli passacavo.

Mini guida all'acquisto:

Per scegliere un sistema antidecubito adatto, parti dall'indicazione: se la necessità è la prevenzione fino al **IV stadio**, è importante un materasso a elementi con pressione **alternata** e funzioni di sicurezza. Valuta poi la struttura: la tecnologia **CELL-ON-CELL** è utile per ridurre lo **sprofondamento (BOTTOM-OUT)** e mantenere una base di supporto anche in caso di mancanza di corrente. Considera la praticità in reparto o a domicilio: poter usare il materasso **senza aggiungerne un altro** semplifica l'allestimento, mentre una coperta **impermeabile e traspirante** con **zip su 4 lati** facilita la sanificazione. Infine, verifica elementi di continuità assistenziale e gestione: **allarmi, valvola CPR e connettori veloci** rendono il sistema più gestibile anche durante movimentazioni o trasporto del paziente.

Kit antidecubito, materasso antidecubito Nylon PVC, materasso antidecubito fino IV stadio, sistema antidecubito con compressore, materasso a pressione alternata 2 vie, tecnologia cell-on-cell antidecubito, materasso anti bottom-out, compressore antidecubito allarme bassa pressione, materasso con valvola CPR, H582_243.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **Profondità** 21 cm
- **Larg.** 86 cm
- **lunghezza** 200 cm
- **Tipologia** ad aria




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

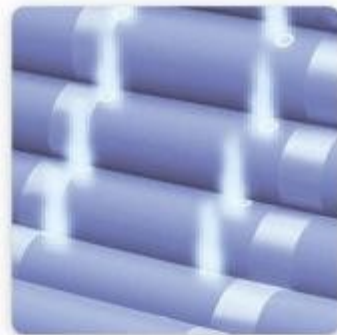

HOLITY.COM

Kit antidecubito materasso in Nylon+PVC h582_243

Profondita: 21 cm

Larg.: 86 cm

Lunghezza: 200 cm

Tipologia: ad aria